

+7 (812) 321-67-80

[Заказать звонок](#)

8-800-511-67-80

Бесплатно по России

Цены в ₽

Рус [Eng](#)

поиск

НАЙТИ

СЕРВИС

ЗАПРОСИТЬ КП

Сухая углекислая ванна «Гейзер»

[Главная](#) [Каталог](#) [Углекислые и радоновые ванны](#) Сухая углекислая ванна «Гейзер»



Для экономии углекислого газа введен параметр «вес пациента», позволяющий более точно рассчитать его объем относительно объема ванны



Концентрация углекислого газа в ванне
5-55 %

Максимальная мощность
2 кВА

Температурный режим
25-33 С

Функция быстрого удаления газо-воздушной смеси
1 мин. 30 сек.

 производство Physiotechnica

 Доставка по России и странам СНГ

 Обучение

 Сделано в России

 Сервис

790 000 ₽

[Сменить валюту](#)

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ/ЗАПРОСИТЬ КП

Есть вопросы по товару?

Закажите бесплатную
консультацию специалиста

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Видео, фото, новости по оборудованию в наших соцсетях:





МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код вида: 284890

Баня паровая для
физиотерапии

Данное оборудование входит в приказ об
оснащении:


92н

366н

** Просим обратить внимание! Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах, точном наименовании, модификациях, характеристиках и цене необходимо обращаться к менеджерам отдела продаж ООО "Физиотехника".*



Сухая углекислая ванна Гейзер от производителя Физиотех...

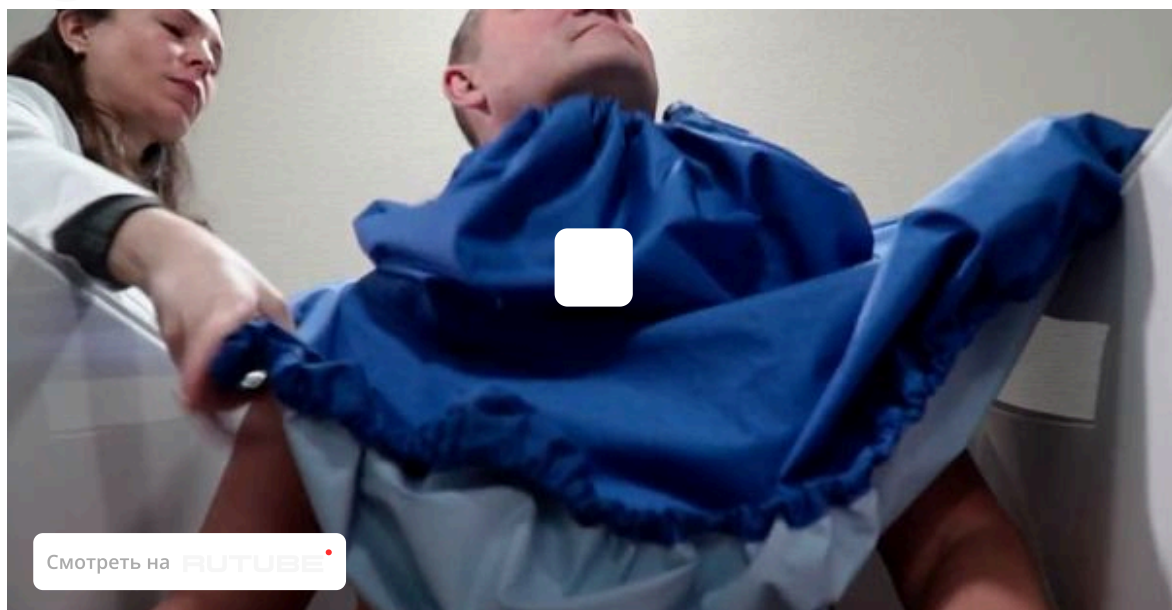

Смотреть на **RUTUBE**

Сухая углекислая ванна «Гейзер»: современный метод лечения и профилактики.

Принцип действия и конструктивные особенности.

Сухая углекислая ванна «Гейзер» разработана для эффективного лечения и профилактики различных заболеваний посредством воздействия на организм углекислого газа в регулируемой концентрации. Во время процедуры пациент располагается сидя в специальной герметичной ванне с дверцей. Верхняя часть закрывается плотной мембраной с отверстием для головы, а мягкая манжета вокруг шеи предотвращает выход газа за пределы ванны. Такая конструкция обеспечивает дыхание обычным воздухом, в то время как углекислый газ концентрируется только внутри камеры.

Основные цели процедуры.

Главной задачей сеанса в СУВ является повышение уровня кислорода в крови и его эффективная доставка к важнейшим органам — сердцу и головному мозгу. Это способствует активизации обменных процессов и ускорению регенерации тканей. Благодаря этим свойствам процедуры особенно актуальны для профилактики и реабилитации после тяжёлых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт миокарда.

Биохимия и терапевтический эффект.

В организме гемоглобин работает по принципу обмена: кислород доставляется тканям только при наличии углекислого газа, который берется «в обмен». При недостатке CO_2 кислород не может эффективно проникнуть в ткани, что приводит к состоянию гипоксии — недостатку кислорода в органах и мышцах. Это, в свою очередь, вызывает сосудистые спазмы и повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, ожирения, диабета и других заболеваний.

Восстановление здоровья с помощью углекислых ванн.

- Применение углекислых ванн способствует естественной нормализации содержания CO_2 в артериальной крови. Процедура расширяет капилляры, улучшает кровообращение во всех органах, нормализует обменные процессы в сердечной мышце и конечностях, а также стимулирует работу дыхательного центра, способствуя комплексному оздоровлению организма.
- Восстановление после травм и интенсивных нагрузок. Сухая углекислая ванна эффективно помогает спортсменам быстро вернуть физическую форму после травм и серьёзных тренировочных нагрузок. Также процедура рекомендуется людям, чья деятельность связана с постоянным стрессом и повышенной физической активностью, способствуя ускоренной регенерации организма и снижению утомления
- Польза для сосудистой системы ног. Воздействие углекислого газа оказывает положительный эффект на сосуды нижних конечностей, особенно после значительных нагрузок. Благодаря процедуре повышается тонус сосудистых стенок, что способствует улучшению венозного оттока крови и уменьшению застойных явлений, поддерживая здоровье и тонус сосудистой системы. Углекислые ванны благоприятно влияют на иммунную систему организма, активизируют процессы сопротивляемости внешним неблагоприятным факторам, а также предупреждают преждевременное старение.

Основные преимущества сухой углекислой ванны Гейзер:

- СУВ "Гейзер" удобна для входа и выхода из нее пациента, имеет **регулируемый по высоте стул со спинкой и увеличенный внутренний объем**. Внутренние поверхности ванны обогреваются до комфортной температуры, устанавливаемой оператором.
- Управление всеми этапами процедуры в сухой углекислой ванне «Гейзер» осуществляется через **яркий цветной ЖК-дисплей** с удобным интерфейсом. Это позволяет медицинскому персоналу быстро и точно задавать необходимые параметры для каждого сеанса. Концентрация CO_2 в камере также задаётся посредством панели управления (в пределах от 5 до 55%).
- Врач имеет возможность создать и сохранить в памяти аппарата до **4 персонализированных программ**.

Это значительно упрощает и ускоряет подготовку к процедурам, особенно при работе с разными пациентами. Во время процедуры на дисплее отображаются: Текущее время сеанса, Концентрация углекислого газа (CO_2) во время заполнения ванны, Изменение уровня CO_2 по окончании процедуры.

- Для безопасности и комфорта используется специализированный вентилятор, который в течение 1 минуты 30 секунд выводит газо-воздушную смесь по отводной трубе диаметром 32 мм за пределы помещения, исключая попадание углекислого газа в рабочее пространство.
- Для повышения экологичности и экономии углекислого газа введен параметр «вес пациента» позволяющий более точно рассчитать его объем относительно объема ванны. Данное дополнение позволит отпускать на 15% больше процедур и сократит выброс углекислого газа в атмосферу.

При разработке ванны Гейзер был учтён опыт использования аналогичного оборудования других производителей и пожелания медицинского персонала. Благодаря этому удалось добиться улучшенных технических параметров и внести конструктивные изменения в нашу модель сухой углекислой ванны.

Конструктивные особенности модели «Гейзер»:

- Корпус выполнен из прочного стеклопластика и оснащён дверью с доводчиком, что обеспечивает полную герметичность и исключает выход углекислого газа наружу.
- Внутренние стенки ванны оборудованы системой подогрева, поддерживающей комфортную температуру в диапазоне 25–33 °C, которую оператор может регулировать по необходимости.
- Для повышения эффективности процедуры внутри камеры постоянно поддерживается необходимый уровень влажности за счёт подачи пара, что способствует улучшенной диффузии углекислого газа в кровь.
- Увеличенный внутренний объём ванны «Гейзер» подходит для пациентов **любого роста и комплекции**, при этом внешние габариты ванны невелики. Стул со спинкой, регулируемый по высоте, обеспечивает комфорт пациента во время процедуры. Мягкая манжета вокруг шеи надёжно защищает от попадания углекислого газа в дыхательные пути.

Показания к применению:

- **реабилитация пациентов после COVID-19 (постCOVID-19-синдром); - [подробная статья](#)**
- заболевания органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма);
- кардиологические заболевания: состояния после миокардита, миокардиодистрофия, кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца, пороки митрального и аортального отверстий, гипертоническая болезнь (I - II стадии), гипотоническая болезнь;
- профилактика и лечение НМК (нарушения мозгового кровообращения);
- варикозное расширение вен и нарушения обмена веществ (сахарных диабет, ожирение);

- нарушения работы щитовидной и половых желез;
- стресс, пониженный иммунитет и общая слабость;
- кожные заболевания.

Основные действия углекислоты на организм:

- улучшение кислородного обмена в тканях;
- замедление процессов старения организма;
- улучшение восстановительных возможностей организма, укрепление иммунитета и регенерационных функций;
- улучшение состояния нервной системы;
- улучшение состояния эндокринной системы;
- улучшение работы легочной и сердечной системы;
- стабилизация артериального давления;
- восстановление кожных покровов при наличии заболеваний кожи (с устранением зуда, шелушений, покраснений и воспалений);
- ускорение кровотока и насыщение крови кислородом;
- помощь в борьбе с целлюлитом и избыточной массой тела.

Противопоказания к применению:

- сердечная недостаточность выше 2 степени;
- тяжелые нарушения сердечного ритма;
- злокачественные новообразования;
- аневризма аорты и сердца;
- острые воспалительные легочные и бронхолегочные заболевания.

Режим работы:

- Концентрация углекислого газа в ванне 5-55 %;
- Температурный режим 25-33С;
- Увлажнение паром;
- Цифровое управление с помощью цветного ЖК дисплея;
- 4 встроенных лечебных программы;
- Функция быстрого удаления газо-воздушной смеси (1 мин. 30 сек.);
- Цифровая индикация концентрации CO₂;
- Сиденье с пневмо лифтом;
- Максимальная мощность 2 кВА.



*** Сайт и все рекламные материалы на нем (названия, описания, фото, тех. характеристики и схемы) носят исключительно информационный - рекламный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах, точном наименовании, модификациях, характеристиках и их цене необходимо обращаться к менеджерам отдела продаж ООО "Физиотехника".**

Смотрите также



[Сухая углекислая радоновая ванна «Гейзер»](#)



[Пароуглекислая ванна «Оккервиль Комби» \(с дверцей\)](#)



[Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом \(АНУ\)](#)

[Назад](#)

Подписаться на новости компании

Ваш email

[ПОДПИСАТЬСЯ](#)

☐ [Согласен с политикой конфиденциальности](#)

Наша продукция

Ванны медицинские водолечебные
Водолечебные кафедры и души
Гальванические ванны
Кухни для грязе- и теплолечения
Медицинские подъемники
Ванны сухого флоатинга / иммерсии
Вспомогательное оборудование

Система подводного пневмогидромассажа
Ванны для конечностей
[Углекислые и радоновые ванны](#)
Системы вытяжения позвоночника
Ванны/кушетки сухого гидромассажа
Кушетки физиотерапевтические
Палитра цветов

О Компании

[Спа](#)

[Новинки](#)

[Медиа](#)

[Новости](#)

[Покупателям](#)

[Оздоровительное оборудование](#)

[Контакты](#)

[Оборудование по приказам МЗ РФ](#)

Physiotecnica

📍 Адрес

188510, Ленинградская область,
Ломоносовский район, ул. Понсе,
д. 4/1

[Показать на карте](#)

☎ Телефон

+7 (812) 321-67-80

многоканальный

[Заказать звонок](#)

[Политика конфиденциальности](#)

🌐 Социальные сети



info@pt-med.ru

[Реквизиты](#)

[Карта сайта](#)

© ООО "Физиотехника", 2026

Компания «Физиотехника» – производство и продажа водолечебного оборудования и медицинской техники, проектирование и комплексное оснащение учреждений.



Создание сайта
[Webportnoy](#)